


LIFEPAK AED-System



BESSERE TECHNOLOGIE
BESSERE ERGEBNISSE
MEHR GERETTETE LEBEN

LIFEPAK® CR2 Defibrillator mit LIFELINKcentral™ AED-Programm Manager

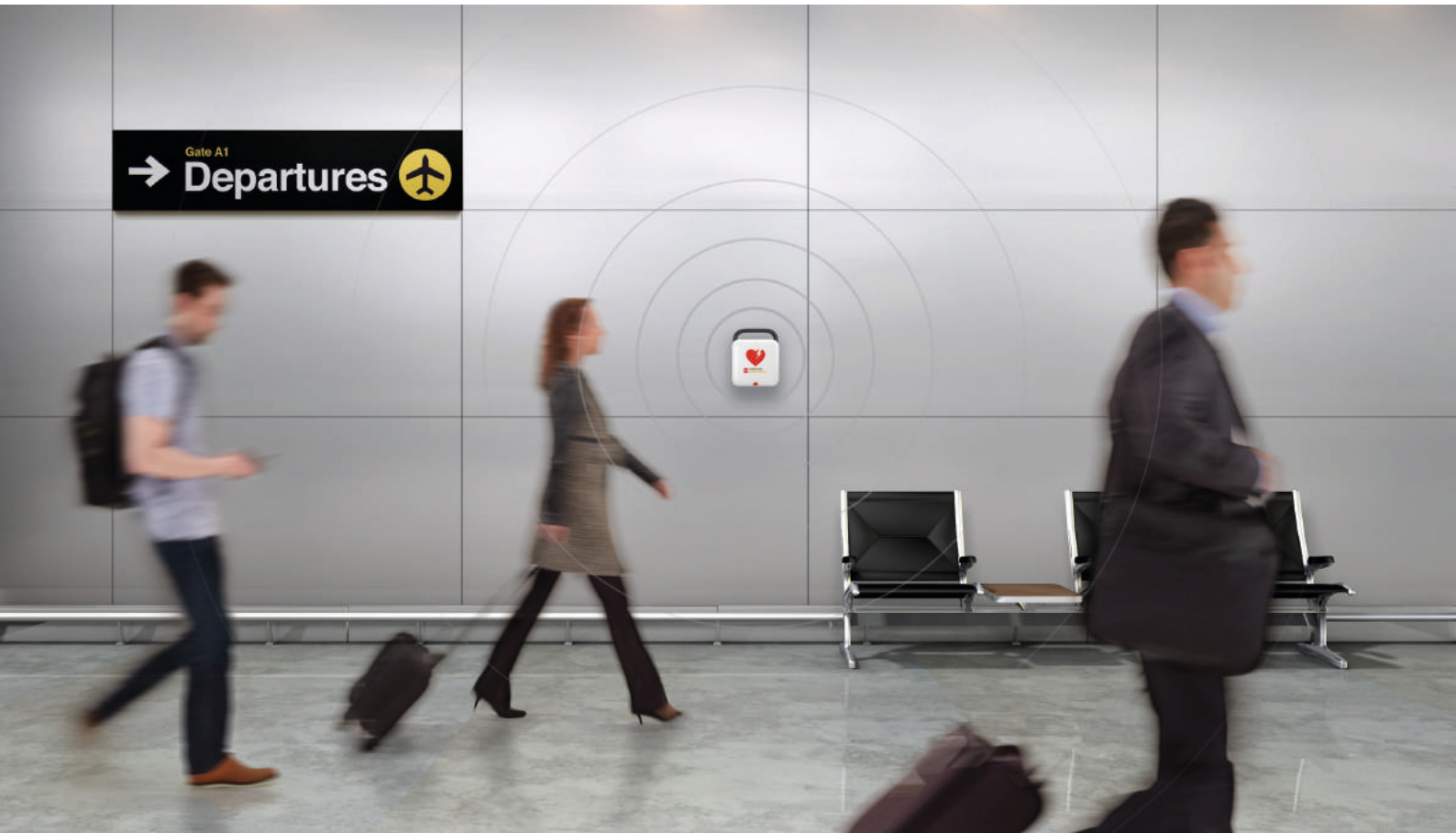

EIN SICHERES KONZEPT ZUR NOTFALLBEREITSCHAFT VON DEFIBRILLATOREN

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jedem widerfahren – jederzeit und überall. Eine sofortige Behandlung ist entscheidend. Die Überlebenschance eines Patienten nimmt mit jeder Minute ohne Behandlung drastisch ab.¹ Aus diesem Grund sind leicht zugängliche Defibrillatoren so wichtig. Sie stellen eine lebensrettende Technologie dort zur Verfügung, wo sie am meisten bewirken kann. Wenn ein Notfall eintritt, sollten Sie ein einfaches und zuverlässiges AED-System zur Verfügung haben.

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der bessere Technologie für bessere Ergebnisse sorgt – und für mehr gerettete Leben. Der bahnbrechende **LIFEPAK® CR2 Defibrillator** mit dem **LIFELINKcentral™ AED Program Manager** ist das Herzstück eines kompletten AED-Systems. Alles und jeder Beteiligte ist vernetzt, unnötige Verzögerungen werden bei einem plötzlichen Herzstillstand verringert.



LEBENSRETTUNG KANN EINFACHER SEIN ALS MAN DENKT

KONTINUIERLICHE HLW ERHÖHT DIE ÜBERLEBENSRATE²

Der CR2 ist der einzige AED, der Thoraxkompressionen während der EKG-Rhythmusanalyse zulässt und damit Pausen zwischen der HLW (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und der Defibrillation reduziert. Wenn ein defibrillierbarer Rhythmus erkannt wird, liefert der CR2 Schocks mit leistungsstarker eskalierender Energie, ohne dass der Anwender eine eigene Entscheidung treffen muss. Mit dem vollständig automatisierten CR2 kann sich der Nothelfer auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist – Leben retten.



ZUVERLÄSSIGE UND EINFACHE ANWENDUNG

- 
Zweistufiges Design
 Mit leicht verständlichen großen Grafiken. Selbst völlig ungeschulte Anwender wissen eindeutig, was als Erstes zu tun ist.
- 
QUIK-STEP™ -Elektroden
 Gerät öffnen, roten Handgriff ziehen und die Elektroden einzeln direkt vom Gerät abziehen, um sie einfach und schnell auf dem Patienten zu platzieren.
- 
cprINSIGHT® -Analysetechnologie
 Analysiert bereits während der Thoraxkompressionen, um einen defibrillierbaren Rhythmus festzustellen, eine Pause ist nicht notwendig.
- 
Metronom und HLW-Coaching
 Sorgt für eine effektive Geschwindigkeit und bietet akustische Unterstützung, damit Anwender die richtige Technik bestimmen und gegebenenfalls korrigieren können.
- 
ClearVoice™ -Technologie
 Erkennt Umgebungsgeräusche und passt die Lautstärke den Anweisungen entsprechend an.
- 
Höchste verfügbare Energie
 Je nach Bedarf, bis zu 360 J für effektivere Schocks.
- 
Kind-Modus-Taste
 Schnelles und einfaches Umschalten zwischen Erwachsenen- und Kindermodus, je nach Alter des Patienten.
- 
Zweisprachig (optional)
 Umschalten zwischen zwei voreingestellten Sprachen bei der Verwendung des Geräts.
- 
LIFEPAK TOUGH™
 IP55-Schutzart für anspruchsvolle Umgebungen.
- 
Garantie
 Sie haben 8 Jahre Garantie auf den LIFEPAK® CR2.

Quellenangaben

¹ Graham R, McCoy M, Schultz A. Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival, A Time to Act. Institute of Medicine Report, 2015.
² Christenson J, Andrusiek D, Everson-Stewart S, et al. Chest compression fraction determines survival in patients with out-of-hospital ventricular fibrillation. *Circulation*. 2009;120:1241-1247.



LIFEPAK® CR2 AED

Defibrillator mit Hard-Shell Tasche



LIFEPAK® CR2 AED mit WLAN

WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral™ für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung, cprINSIGHT® Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus, ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkeanpassung der Sprachanweisungen, cprCOACH® Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie auf das Gerät.

Vollautomatisch

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/€
99512-000096	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch		1 Stück	2070,00
99512-000098	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2145,00

Halbautomatisch

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/€
99512-000381	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch		1 Stück	1970,00
99512-000385	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2045,00

LIFEPAK® CR2 AED mit 3G Simkarte

3G mit Simkarte zur mobilen Kommunikation, WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral™ für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung, cprINSIGHT® Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus, ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkeanpassung der Sprachanweisungen, cprCOACH® Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie auf das Gerät.

Nur in Verbindung mit Datenplan für 3G LIFEPAK® CR2.



Vollautomatisch

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/€
99512-000393	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch		1 Stück	2220,00
99512-000398	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2295,00

Halbautomatisch

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/€
99512-000391	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch		1 Stück	2120,00
99512-000400	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2195,00

LIFEPAK® CR2 AED

Defibrillator mit Handgriff



LIFEPAK® CR2 AED mit WLAN

WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral™ für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung, cprINSIGHT® Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus, ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkeanpassung der Sprachanweisungen, cprCOACH® Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie auf das Gerät.



Vollautomatisch

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/€
99512-000097	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch		1 Stück	1995,00
99512-000099	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2070,00

Halbautomatisch

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/€
99512-000382	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch		1 Stück	1895,00
99512-000386	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	1970,00

LIFEPAK® CR2 AED mit 3G Simkarte

3G mit Simkarte zur mobilen Kommunikation, WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral™ für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung, cprINSIGHT® Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus, ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkeanpassung der Sprachanweisungen, cprCOACH® Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie auf das Gerät.

Nur in Verbindung mit Datenplan für 3G LIFEPAK® CR2.



Vollautomatisch

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/€
99512-000394	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch		1 Stück	2145,00
99512-000399	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2220,00

Halbautomatisch

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sprachausgabe	Konfigurierbare Sprachen	VE	Preis/€
99512-000392	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch		1 Stück	2045,00
99512-000401	LIFEPAK® CR2 AED	deutsch und 2. Sprache (konfigurierbar)	+	1 Stück	2120,00

Datenplan für 3G LIFEPAK® CR2

Zwangsoption bei 3G Version. Enthält die Mobilfunkgebühren für 4 Jahre bzw. 8 Jahre zur Übertragung von Daten des LIFEPAK® CR2 an LIFELINKcentral™ und LIFENET.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Laufzeit	Preis/€
50998-000025	Datenplan für 3G LIFEPAK® CR2	4 Jahre	340,00
50998-000026	Datenplan für 3G LIFEPAK® CR2	8 Jahre	575,00

LIFELINKcentral™ LIZENZ

LIFELINKcentral™ Basic

Lifetime-Lizenz

Best.-Nr. 99428-000350

Basiszugang zu LIFELINKcentral™ zur Geräteverwaltung. Ist bereits im Lieferumfang des Gerätes enthalten.

Der Basiszugang umfasst:

- ✓ Email-Benachrichtigung über den Gerätestatus
- ✓ Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK® CR2

INKLUSIVE

LIFELINKcentral™ Advantage

1-Jahreslizenz, pro CR2

Best.-Nr. 99428-000378

Erweiterter Zugang zu LIFELINKcentral™ zur Geräteverwaltung.

Der erweiterte Zugang umfasst:

- ✓ Email-Benachrichtigung über den Gerätestatus
- ✓ Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK® CR2
- ✓ Manuelle Verwaltung von Geräteinformationen und Prüfindervallen auch bei nicht vernetzten Geräten
- ✓ Nachträgliches Herunterladen von Berichten (nach Real-Einsatz, kein Vor-Ort-Service)
- ✓ Bereitschaftskontrolle (kein Vor-Ort-Service)
- ✓ Free Supply Replenishment (nach Real-Einsatz)

95,00 €

LIFELINKcentral™ Advantage

2-Jahreslizenz, pro CR2

Best.-Nr. 99428-000380

Erweiterter Zugang zu LIFELINKcentral™ zur Geräteverwaltung.

Der erweiterte Zugang umfasst:

- ✓ Email-Benachrichtigung über den Gerätestatus
- ✓ Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK® CR2
- ✓ Manuelle Verwaltung von Geräteinformationen und Prüfindervallen auch bei nicht vernetzten Geräten
- ✓ Nachträgliches Herunterladen von Berichten (nach Real-Einsatz, kein Vor-Ort-Service)
- ✓ Bereitschaftskontrolle (kein Vor-Ort-Service)
- ✓ Free Supply Replenishment (nach Real-Einsatz)

171,00 €

LIFELINKcentral™ Advantage

4-Jahreslizenz, pro CR2

Best.-Nr. 99428-000382

Erweiterter Zugang zu LIFELINKcentral™ zur Geräteverwaltung.

Der erweiterte Zugang umfasst:

- ✓ Email-Benachrichtigung über den Gerätestatus
- ✓ Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK® CR2
- ✓ Manuelle Verwaltung von Geräteinformationen und Prüfindervallen auch bei nicht vernetzten Geräten
- ✓ Nachträgliches Herunterladen von Berichten (nach Real-Einsatz, kein Vor-Ort-Service)
- ✓ Bereitschaftskontrolle (kein Vor-Ort-Service)
- ✓ Free Supply Replenishment (nach Real-Einsatz)

285,00 €



TECHNISCHE DATEN LIFEPAK® CR2 Defibrillator

Defibrillator	
Wellenform	Biphasisch abgeschnittener Exponentialimpuls mit Spannungs- und Impulsdauerkompensation für Patientenimpedanz.
Impedanzbereich des Patienten	10 Ohm bis 300 Ohm
Energiegenauigkeit	10 % der Energieeinstellung in 50 Ohm 15 % der Energienennleistung in 25 bis 175 Ohm
Energieausgabesequenz	Mehrstufig, konfigurierbar von 150 Joule bis 360 Joule.
Standardmäßige Energieeinstellungen	200 J, 300 J, 360 J (für Erwachsene) 35 J, 50 J, 75 J, 90 J (für Kinder)
Shock Advisory System™	EKG-Analysesystem, das angibt, ob ein Schock angemessen ist und den Kriterien für die Rhythmuserkennung in IEC 60601-2-4 entspricht.
cprINSIGHT®-Analysetechnologie	Ermöglicht es dem Defibrillator, den Herzrhythmus des Patienten während der Durchführung der HLW zu analysieren.
HLW-Coaching	Anweisungen für HLW an Erwachsenen und Kindern, einschließlich Feedback, wenn keine HLW festgestellt wird. Unterstützung hinsichtlich der Kompressionsrate und Anweisungen zur Platzierung der Hände.
Zeit nach HLW, Schock bei der 360 J (mit cprINSIGHT® aktiviert)	Semi-Automatik: <7 Sekunden Vollautomatische: <13 Sekunden
Ladezeit	0 Sekunden: erste Schockabgabe mit 150 J oder 200 J (falls Gerät vorgeladen ist). Ist cprINSIGHT® aktiviert, werden nachfolgende Schocks während der CPR geladen und sind am Ende der Wiederbelebungsphase bereit für einen Schock.

Bedienelemente	
Deckelöffnung/EIN-AUS	Steuert das Ein- und Ausschalten des Geräts.
Schock-Taste, halbautomatisch	Blinkt vor Schockabgabe und verabreicht (falls notwendig) nach Betätigung die benötigte Defibrillationsenergie.
Schock-Taste, vollautomatisch	Blinkt vor Schockabgabe und verabreicht (falls notwendig) ohne Betätigung durch den Anwender, die benötigte Defibrillationsenergie.
Kind-Modus-Taste	Ermöglicht es dem Anwender, die Energieabgabe und HLW-Unterstützung je nach Alter des Patienten anzupassen.
Sprach-Taste	Ermöglicht es dem Anwender, für eine optionale mehrsprachige Konfiguration zwischen der ersten und der zweiten Sprache umzuschalten.
Elektrische Sicherheit	Eingangsschutz gegen Hochspannungsimpulse des Defibrillators gemäß IEC 60601-1/EN60601-1.
Sicherheitsklassifikation	Gerät mit interner Stromversorgung. IEC 60601-1/EN60601-1.

Benutzeroberfläche	
Benutzeroberfläche	Die Benutzeroberfläche umfasst akustische Anweisungen und hörbare Töne.
ClearVoice™-Technologie	Die Anweisungen und die Lautstärke des Geräts werden basierend auf dem Geräuschpegel der Umgebung automatisch angepasst.
Gerätestatusanzeigen	Visuelle und akustische Indikatoren zeigen die Systembereitschaft an (Gerät, Elektroden und Batterie).
Elektrodenverpackung	Intuitiv anwendbare, schnell zugängliche Elektroden.
Elektrodenwechsel	Alle 4 Jahre

Umgebungsbedingungen	
Hinweis	Alle angegebenen Leistungsspezifikationen basieren auf der Voraussetzung, dass das Gerät vor der Anwendung (mindestens zwei Stunden lang) bei Betriebstemperatur gelagert wurde.
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +60 °C mit Batterie und Elektroden; maximale Lagerdauer in diesem Temperaturbereich beschränkt auf eine Woche.
Langfristige Lagerung	Der Defibrillator sollte immer innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs von 15 °C bis 35 °C gelagert werden.
Höhe	-382 m bis 4.572 m NN
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend).
Wasserbeständigkeit	IEC 60529/EN60529 IPX5 mit angeschlossenen Elektroden und eingelegter Batterie.
Staubbeständigkeit	IEC 60529/EN60529 IP5X mit angeschlossenen Elektroden und eingelegter Batterie.
Schock	MIL-STD-810F, Methode 516.4, Verfahren 1, (40 g, 6-9 ms Impuls, 1/2 Sinus pro Achse).
Vibration	MIL-STD-810F, Methode 514.4, Helikopter – Kategorie 6 (3,75 Grms) und bodengebunden mobil – Kategorie 8 (2,85 Grms).

Physische Merkmale <i>Mit Griff, einschließlich Elektroden und Batterie:</i>	
Größe	9,7 cm
Breite	22,6 cm
Tiefe	27,4 cm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör	
PRIMÄRBATTERIE	
Art	Lithium-Mangandioxid (Li/MnO ₂), 12 V, 4,7 Ah.
Kapazität (bei 20 °C)	Verabreicht 166 Schocks zu 200 J (mit einer Min. HLW zwischen den Schocks) oder 103 Schocks zu 360 J (mit einer Minute HLW zwischen den Schocks) oder 800 Minuten Betriebszeit.
Lagerzeit (wenn nur tägliche Tests stattfinden)	Eine neue Batterie hat (bei Nichtbenutzung) eine Lebenszeit von 4 Jahren.
Batteriewechsel-Anzeige	Bei der ersten Anzeige verbleiben mindestens 6 Schocks und 30 Minuten Betriebszeit.
Gewicht	0,3 kg
ELEKTRODEN	
Elektroden	Können sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern verwendet werden.
Elektrodenverpackung	Intuitiv anwendbare, schnell zugängliche Elektroden.
Elektrodenwechsel	Alle 4 Jahre

Datenspeicher	
Speicherart	Interner digitaler Speicher (Flash-RAM).
EKG-Speicher	Mindestens 60 Minuten EKG-Aufzeichnung für zwei Patienteneignisse.

Kommunikation	
Kommunikation	USB, WLAN 802.11 b/g/n oder mobiler Datentransfer zum LIFELINKcentral™ AED Program Manager oder LIFENET®-System.

LIFEPAK® CR2 AED ZUBEHÖR



LIFEPAK® CR2 Hard-Shell Tragetasche

Robuste Tasche zur Aufbewahrung des LIFEPAK® CR2. Bietet auf der Rückseite Platz für QUICK-STEP Ersatz-Elektroden.

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11260-000047	LIFEPAK® CR2 Hard-Shell Tragetasche	1 Stück	75,00



LIFEPAK® CR2 Ambu® Res-Cue Mask

Ersthelfer Set beinhaltet:

- ▶ 2 Paar Einweg-Handschuhe
- ▶ 1 wiederverwendbare Atemmaske
- ▶ 1 Einweg-Rasierer
- ▶ 1 Kleiderschere
- ▶ 1 Einweg-Reinigungstuch

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11998-000321	LIFEPAK® CR2 Ambu® Res-Cue Mask	1 Set	35,00



LIFEPAK® CR2 QUICK-STEP Elektroden

Für Stimulation/Defibrillation/EKG, Lagerfähigkeit 4 Jahre.

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11101-000021	LIFEPAK® CR2 QUICK-STEP Elektroden	1 Stück	100,00



LIFEPAK® CR2 Batterie

Lithium-Mangandioxid (Li/MnO₂), 12,0 V, 4,7 Ah, 55,8 Wh., Bereitschaftszeit 4 Jahre, wenn im ungebrauchten Gerät installiert.

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11141-000165	LIFEPAK® CR2 Batterie	1 Stück	225,00

LIFEPAK® CR2 GERÄTEDECKEL (Ersatz)



Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11512-000001	LIFEPAK® CR2 Gerätedeckel (Ersatz)	1 Stück	65,00

LIFEPAK® CR2 Handgriff



Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11512-000002	LIFEPAK® CR2 Handgriff	1 Stück	25,00



LIFEPAK® CR2 WANDHALTERUNG

Universal-Halterung.

Best.-Nr.	Artikelbez.	Farbe	Preis/€
11210-000046	LIFEPAK® CR2 Wandhalterung	Weiß <input type="checkbox"/>	46,00
11210-000047	LIFEPAK® CR2 Wandhalterung	Grün <input checked="" type="checkbox"/>	46,00

ROTAID AED WANDSCHRÄNKE

Innen für Defibrillator - Farbe: Grün (Full). Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design: schnell erkennbar und schnell zu öffnen. Mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest (Schutzklasse IK10), wasserabweisend, UV Schutz. Selbstmontage auf Putz. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Länge ca. 47 cm, Breite ca. 47 cm, Tiefe ca. 18 cm.



Best.-Nr.	Artikelbez.	Farbe	Gewicht	VE	Preis/€
11996-000403	Rotaide Plus AED Wandschrank	Grün	ca. 1,7 kg	1 Stück	234,00
11996-000404	Rotaide Solid Plus AED Wandschrank	Grün	ca. 6,7 kg	1 Stück	332,00
11996-000405	Rotaide Solid Plus Heat AED Wandschrank	Grün	ca. 6,7 kg	1 Stück	498,00

Rotaide Plus AED Wandschrank

Innen für CR2. Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design: schnell erkennbar und schnell zu öffnen. Mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest (Schutzklasse IK10), wasserabweisend, UV Schutz. Selbstmontage auf Putz. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Länge ca. 47 cm, Breite ca. 47 cm, Tiefe ca. 18 cm, Gewicht ca. 1,7 kg



Best.-Nr.	Artikelbez.	Farbe	VE	Preis/€
11996-000441	Rotaide Plus AED Wandschrank	Weiß	1 Stück	296,00
11996-000442	Rotaide Plus AED Wandschrank	Grün	1 Stück	296,00
11996-000443	Rotaide Plus AED Wandschrank	Rot	1 Stück	296,00
11996-000444	Rotaide Plus AED Wandschrank	Gelb	1 Stück	296,00

Rotaide Solid Plus AED Wandschrank IP55

Innen für CR2. Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design: schnell erkennbar und schnell zu öffnen. Mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest (Schutzklasse IK10), wasserabweisend (IP55), UV Schutz. Selbstmontage auf Putz. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Länge ca. 47 cm, Breite ca. 47 cm, Tiefe ca. 18 cm, Gewicht ca. 6,7 kg



Best.-Nr.	Artikelbez.	Farbe	VE	Preis/€
11996-000445	Rotaide Solid Plus AED Wandschrank IP55	Weiß	1 Stück	380,00
11996-000446	Rotaide Solid Plus AED Wandschrank IP55	Grün	1 Stück	380,00
11996-000447	Rotaide Solid Plus AED Wandschrank IP55	Rot	1 Stück	380,00
11996-000448	Rotaide Solid Plus AED Wandschrank IP55	Gelb	1 Stück	380,00

Rotaide Solid Plus Heat AED Wandschrank


Innen und außen für CR2. Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design: schnell erkennbar und schnell zu öffnen. Ausgestattet mit einer Heizvorrichtung: Die Heizvorrichtung ermöglicht eine Innentemperatur von mindestens 5 °C, auch wenn die Außentemperatur auf -30 °C sinkt. Mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest (Schutzklasse IK10), wasserabweisend (IP55), UV Schutz. Selbstmontage auf Putz. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und 24 V Netzteil (Bitte beachten Sie, dass ein 230 V Anschluss benötigt wird). Länge ca. 47 cm, Breite ca. 47 cm, Tiefe ca. 18 cm, Gewicht ca. 6,9 kg



Best.-Nr.	Artikelbez.	Farbe	VE	Preis/€
11996-000449	Rotaide Solid Plus Heat AED Wandschrank	Weiß	1 Stück	581,00
11996-000450	Rotaide Solid Plus Heat AED Wandschrank	Grün	1 Stück	581,00
11996-000451	Rotaide Solid Plus Heat AED Wandschrank	Rot	1 Stück	581,00
11996-000452	Rotaide Solid Plus Heat AED Wandschrank	Gelb	1 Stück	581,00



ROTAID AED WAHRNEHMUNGSPAKETE

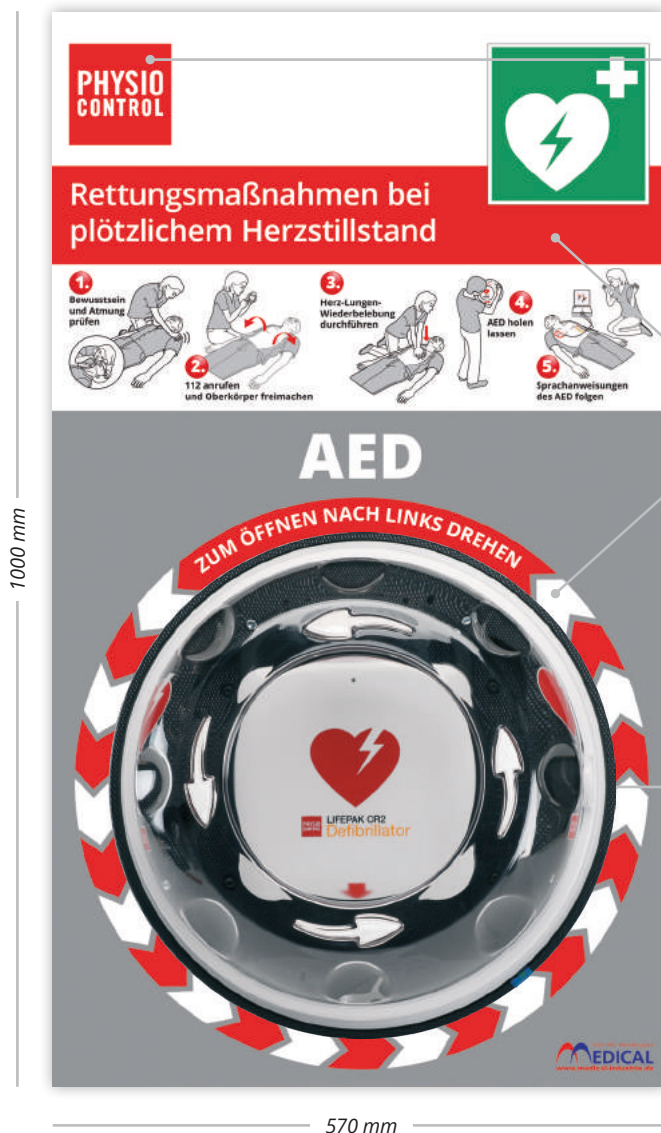

Ihr Logo

Farbgestaltung nach Ihren Wünschen

Wandschrank mit oder ohne Alarm

(AED und Wandschrank müssen separat bestellt werden)

AED Wahrnehmungspaket »BASIC-CR2«

Bestehend aus:

- ▶ 1 x AED Nasenschild, langnachleuchtend
- ▶ 2 x AED Hinweisschild KNS, langnachleuchtend
- ▶ 1 x Halterung für Falblätter »Leitfaden für den Herznotfall«
- ▶ 40 x Falblatt »Leitfaden für den Herznotfall«
- ▶ 1 x A3 Poster:
»Rettungsmaßnahmen bei plötzlichem Herzstillstand«
- ▶ 1 x A3 Poster: »AED Standort«
- ▶ 4 x A4 Poster: »AED Standort«

AED Wahrnehmungspaket »ROTAID-CR2«

Bestehend aus AED Wahrnehmungspaket »BASIC-CR2«
 zuzüglich:

- ▶ 1 x AED Wandschild, individuell gestaltet nach Kundenwunsch mit Logo
- ▶ ALU-Dibond-Platte, Format 57 x 100 cm

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	Preis/€
9990-100	AED Wahrnehmungspaket »BASIC-CR2«	1 Stück	73,00
9990-101	AED Wahrnehmungspaket »ROTAID-CR2«	1 Stück	238,00



AED WANDKÄSTEN

AED Metall Wandkasten, Universal

Metallwandkasten, pulverbeschichtet, stabile Ausführung mit Sichtfenster. Größe 42,5 cm x 42,5 cm x 16 cm. Made in Europe.

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
AED-AI-040	AED Metall Wandkasten, Universal	1 Stück	149,00



AED Metall Wandkasten, Universal mit Alarm

Metallwandkasten, pulverbeschichtet, stabile Ausführung mit Sichtfenster und akustischem Alarm. Größe 42,5 cm x 42,5 cm x 16 cm. Made in Europe.

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
AED-AI-040-AL	AED Metall Wandkasten, Universal	1 Stück	169,00

AED Metall Wandkasten, Universal mit Alarm

Metallwandkasten, pulverbeschichtet, stabile Ausführung mit Sichtfenster, akustischem und optischem Alarm. Größe 47,5 cm x 42,5 cm x 16 cm. Made in Europe.

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
AED-AI-040-AL-PLUS	AED Metall Wandkasten, Universal mit Alarm	1 Stück	199,00



LIFEPAK® CR2 TRAINING

LIFEPAK® CR2 Trainingssystem

AED Trainer mit voll- und halbautomatischer Simulation.
 Simulation von cprINSIGHT® und 2 programmierbare Szenarien.

Inklusive:

- ▶ 1 Paar Übungselektroden mit Drucksensor
- ▶ 1 Trainings-Elektrodenablage inkl. Abdeckung mit rotem Handgriff
- ▶ 1 CR2 Trainer-Tasche mit zusätzlichen Staufächern
- ▶ 1 Bedienungsanleitung
- ▶ 4 Batterien für Trainer



Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11250-000164	LIFEPAK® CR2 Trainingssystem	1 Set	450,00



Ersatz-Übungselektroden mit Drucksensor

Für LIFEPAK® CR2 Trainingssystem
 (5 Paar u. 10 Fixationsstifte).

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11250-000140	Ersatz-Übungs-elektroden mit Drucksensor	1 Set	115,00



LIFEPAK® CR2 Übungs-Elektrodenablage

Inkl. Übungselektroden mit Drucksensor
 u. Abdeckung mit rotem Handgriff.

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11250-000145	LIFEPAK® CR2 Übungs-Elektrodenablage	1 Stück	105,00



LIFEPAK® CR2 Trainings-Elektrodenabdeckung

Mit rotem Handgriff. Trainingselektrode nicht enthalten.

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11250-000139	LIFEPAK® CR2 Trainings-Elektrodenabdeckung	1 Stück	22,00



LIFEPAK® CR2 Trainer-Tasche

Zusätzliche Staufächer für Zubehör.

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
11260-000049	LIFEPAK® CR2 Trainer-Tasche	1 Stück	50,00

LIFEPAK® CR2 Trainer Gerätedeckel (Ersatz) GER

Best.-Nr.	Artikelbez.	VE	Preis/€
21250-000005	LIFEPAK® CR2 Trainer Gerätedeckel (Ersatz) GER	1 Stück	22,00



LEITFADEN FÜR DEN HERZNOTFALL

1 Bewusstlose Person

Laut ansprechen und anfassen.



Atmung prüfen (sehen, hören, fühlen).



112

Notruf absetzen und AED holen lassen.




2 Kompressionen

Oberkörper freimachen und sofort mit Kompressionen beginnen.




5 - 6 cm tief drücken, 100 - 120 x pro Min.


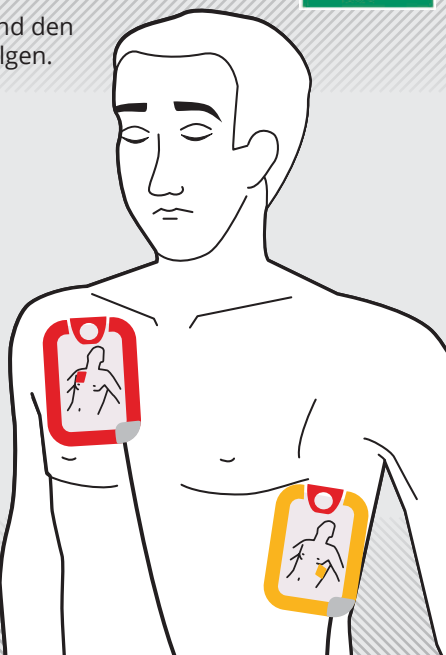
3 AED trifft ein



Deckel öffnen und den Anweisungen folgen.



Elektroden aufkleben.

4 Schock erfolgt

Nach Aufforderung Patienten nicht berühren.



Anweisung des AEDs folgen und nach Aufforderung Kompressionen **wie in Abb. 2** dargestellt fortsetzen.

5 GUTE GRÜNDE FÜR DEN LIFEPAK® CR2

Vieles spricht für den neuen LIFEPAK® CR2 – die einfache Anwendung, die professionelle Funktionalität und seine Herkunft. Physio Control zählt zu den Pionieren der Frühdefibrillation.

Hier die wichtigsten 5 Gründe, die Ihnen die Entscheidung leichter machen:

1 DER LIFEPAK® CR2 IST EINFACH EINFACH.

Das zweistufige Design, die leicht verständlichen großen Grafiken und die klare Stimme des LIFEPAK® CR2 führen Sie souverän durch die Wiederbelebung. Selbst völlig ungeschulte Anwender wissen eindeutig, was als Erstes zu tun ist.

2 DER LIFEPAK® CR2 IST DER PERFEKTE PARTNER.

Das innovative HLW-Coaching bietet akustische Unterstützung, damit Anwender die richtige Technik bestimmen und gegebenenfalls korrigieren können. Bereits während der Herz-Lungen-Wiederbelebung analysiert der CR2 automatisch den Patienten, um einen defibrillierbaren Rhythmus festzustellen.

3 EINS, ZWEI ... LEBEN RETTEN.

Gerät öffnen, roten Handgriff ziehen und die Elektroden einzeln direkt vom Gerät abziehen, um sie einfach und schnell auf dem Patienten zu platzieren. Die Elektroden können sowohl für Erwachsene als auch für Kinder verwendet werden.

4 VERLÄSSLICH.

Sie haben 8 Jahre Garantie auf den LIFEPAK® CR2 sowie eine Haltbarkeit von 4 Jahren auf Batterie und Elektroden.

5 VERNETZT.

Kontrollieren Sie jederzeit und von jedem Ort aus die Einsatzbereitschaft Ihrer LIFEPAK® CR2 – per Smartphone oder Desktopcomputer.



◀ Anwendungsvideo
LIFEPAK® CR2 AED
(vollautomatisch)



◀ Anwendungsvideo
LIFEPAK® CR2 AED
(halbautomatisch)

Erste Hilfe - Betriebshygiene
MEDICAL
www.medical-industrie.de

Medical Industrie GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Straße 16 · 40822 Mettmann

T +49 2104 1775-0
F +49 2104 1775-177

vertrieb@medical-industrie.de